



Patienteninformatie “smile distractor”

In het middenstuk van de distractor zijn er vier gaatjes, elk voorzien van een kleurtje.

De distractor wordt tweemaal per dag met een kwart-draai geactiveerd door te draaien van het ene kleurtje naar een andere.

De pin van het blauwe sleuteltje wordt precies in het middengaatje van de distractor aangebracht, één tot twee mm diep, en dan lichtjes naar beneden en achteruit geduwd, zo scharniert de sleutel. Uw chirurg of orthodontist zal dit de eerste keer samen doen voor de spiegel.

Een kwart-draai stemt overeen met een opening van 0,25mm, als u dit 's morgens en 's avonds doet betekent dit een halve millimeter opening per dag.

Op deze manier kan u na 10 dagen activiteit een opening van 5 mm tussen de twee fronttanden verwachten.


Tijdens deze expansie periode is het van belang dat:

- de distractor ten alle tijde onder spanning staat.
- de spleet tussen de twee frontale tanden elke dag groter wordt.

Eens de vooropgestelde verbredening is bereikt, brengt de arts het blokkeerschroefje stevig aan. Hierdoor wordt de distractor passief.


De distractor dient vast en onbeweeglijk in de mond te blijven gedurende 3 tot 5 maanden. Indien de distractor zou loskomen dan is het belangrijk om snel op consultatie te komen om hem terug vast te zetten door het blokkeerschroefje terug goed aan te spannen.

Wij raden aan om de distractor dagelijks te reinigen met een zachte kindertandenborstel.

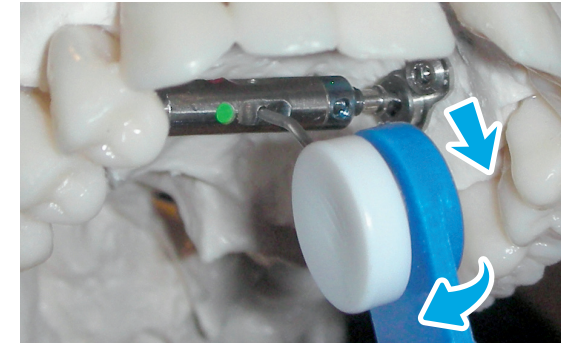

Activering

Schuif de sleutel in het middengaatje en duw naar achter en beneden zodat de sleutel scharniert op de witte knoop.

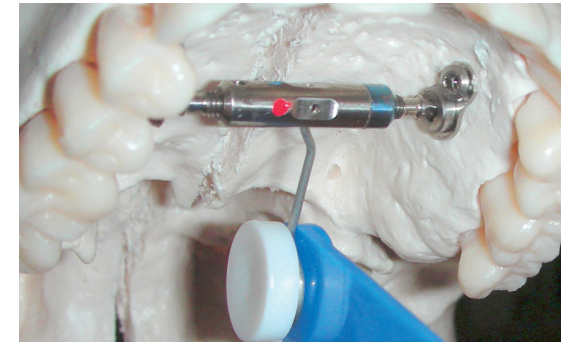

Draai 1/4 toer tot het volgend kleurtje zichtbaar is. Doe dit 2x daags.



Situatie voor gehemelte verbreding.



Situatie na verbreding met de smile distractor.



De orthodontie kan gestart worden direct na de verbreding.

